




PolyMem® SILVER

PolyMem SILVER KONFIGÜRASYONLARI

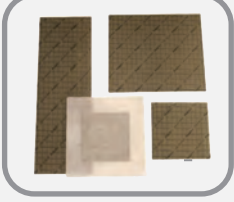

PolyMem Silver

PolyMem Silver yara örtüleri, yarı geçirgen poliüretan kesintisiz ince film arkalı hidrofilik membran matrisinden oluşur. Kombine edilmiş birincil ve ikincil pansuman veya ikincil pansuman olarak kullanın. Yapışkansız veya yapışkanlı kumaş destekli olarak mevcuttur.




PolyMem Wic Silver & PolyMem Wic Silver Şerit

PolyMem Wic Silver & PolyMem Wic Silver Şerit, özellikle kaviteli yaralar için tasarlanmıştır. Bunlar birincil sargı olarak kullanılacak yara dolgu maddeleri olduğundan, bu konfigürasyonlar PolyMem ince film altlığı olmadan gelir. Bu pansumanlar, yara eksüdalarını emdiklerinde genişleyeceğinden, yaranın üçte biri kadar kesilmelidir. İkincil pansuman olarak, diğer uygun PolyMem veya PolyMem konfigürasyonlarından herhangi birini kullanın.


PolyMem Wic Silver Cavity yara dolguları, yara yatağı boyutuna uyum sağlamak için üç adet 1" (2.5cm) genişliğinde şeride kolayca ayrılabilen, önceden kesilmiş, delikli bir tasarıma sahip, hidrofilik bir membran matrisidir.

PolyMem Wic Silver Şerit dolgu maddeleri, yaraların altını oymak ve kanal açmak için kullanılmak üzere yapılandırılmıştır. Derin kanal açma yaralarında kullanım için pansumanın gücünü artırmak, kolay ve eksiksiz bir şekilde çıkarılmasına yardımcı olmak için tıbbi sınıf bir ağ ile güçlendirilmiştir.

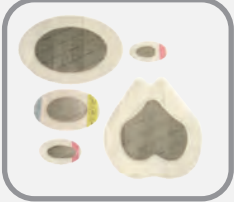

Shapes by PolyMem Silver

Shapes® kutudan çıkar çıkmaz yaralara uyan çeşitli formasyonlarda teslim edilen önceden kesilmiş pansumanlardır. Sakral ve çeşitli oval şekillerde mevcuttur. Sakral ve oval pansumanları birincil ve ikincil pansuman olarak kombine şekilde veya ikincil pansuman olarak kullanın. Film yapışkan membran ile mevcuttur.

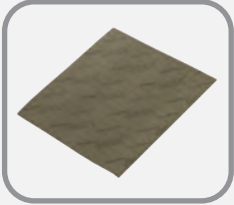

PolyMem Max Silver

Max konfigürasyonu, daha uzun kullanım süresi istendiğinde veya ek tamponlama sağlayan, daha ağır drenajlı yaralar için daha kalın bir formülasyondur. Bu versiyon, aynı boyut, standart kalınlık ve PolyMem Silver formülasyon pansumandan% 60'a kadar daha fazla eksüda emer.

PolyMem SILVER YARA ÖRTÜSÜ

REF	BOYUTLAR	ADET	PAKETLEME
1022	4.7cm x 4.7cm (1.8" x 1.8")	100 Adet	5 kutu / 20 ürün her kutuda
1044	10.8cm x 10.8cm (4.25" x 4.25")	30 Adet	2 kutu / 15 ürün her kutuda
1077	17cm x 19cm (6.5" x 7.5")	15 Adet	1 kutu / 15 ürün her kutuda
1124	10.8cm x 32cm (4.25" x 12.5")	12 Adet	1 kutu / 12 ürün her kutuda